




ZENFLEX™ Pro

Система для встановлення периферичного
стента з лікувальним покриттям

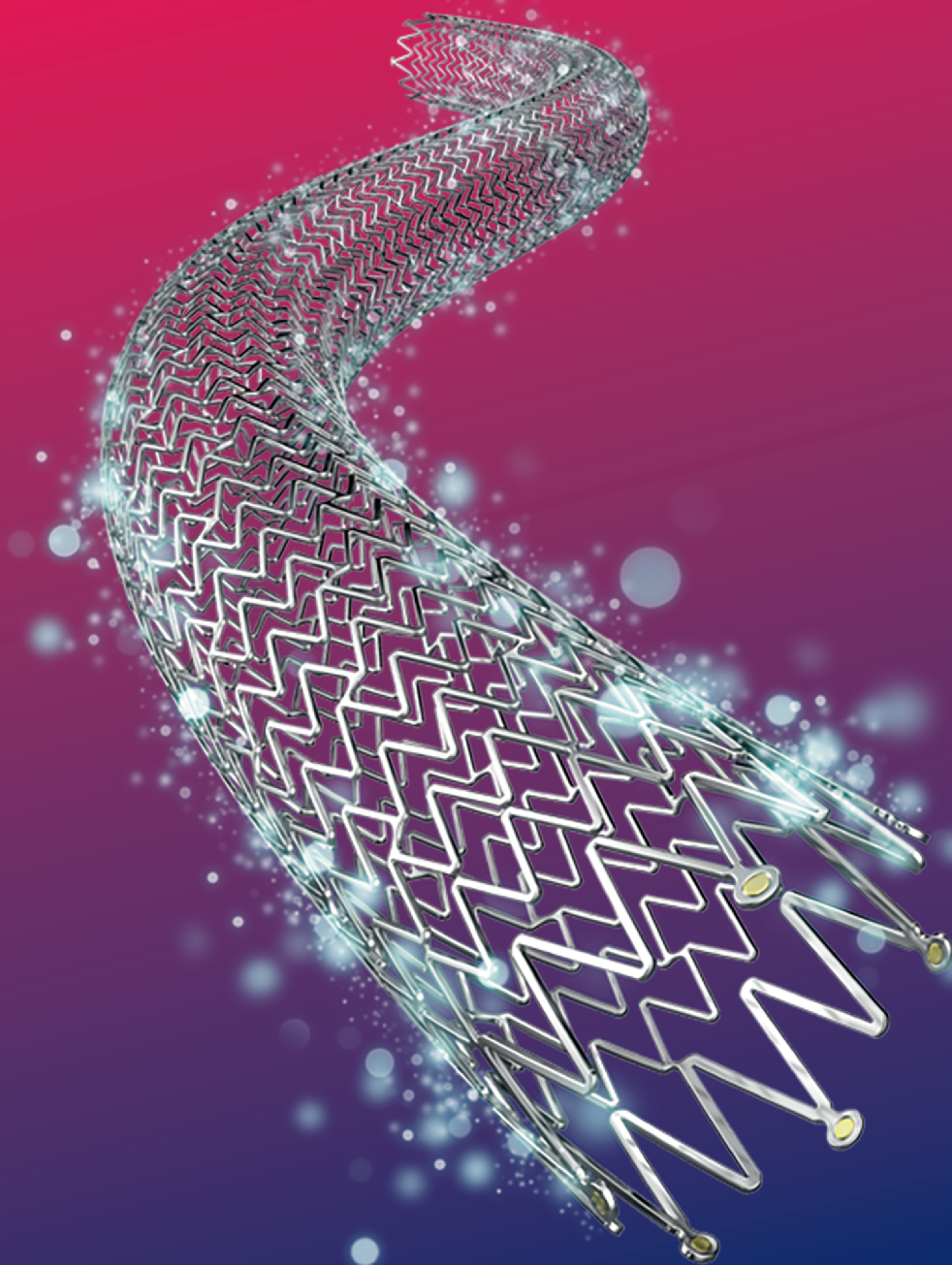

ZENFLEX™ Pro

Система для встановлення периферичного стента з лікувальним покриттям ZENFLEX™


Платформа стента: Набір ZENFLEX™ для встановлення периферичних стентів

Відмінна конструкція стента

- Відкрита спіральна конструкція
- Сегментована конструкція MicroMesh
- Зміщена конструкція Peak-Valley

Результат

- Відмінна гнучкість стента
- Оптимальна відповідність судин і покриття
- Висока радіальна міцність і хороша стійкість до розламування
- Підтримання гладкого просвіту судин протягом тривалого часу

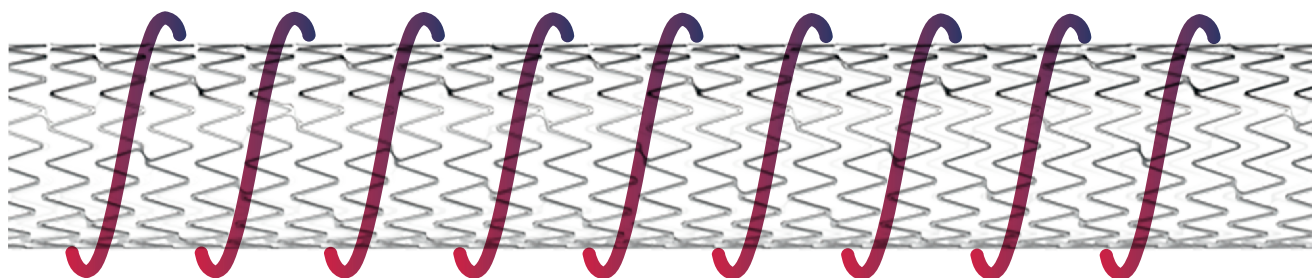


Унікальна технологія з лікувальним покриттям ZENFLEX™ Pro DES

- ZENFLEX™ Pro DES містить 3 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$ паклітакселу. Лікувальне покриття без полімерів, адгезивів або допоміжних речовин мінімізує потенційні ризики гострого та хронічного запалення після імплантації стента.
- Запатентована технологія обробки покриття дозволяє отримати високочистотний шар паклітакселу шляхом перекристалізації, що ефективно знижує швидкість розчинення ліків і покращує тривале вивільнення паклітакселу.




Щільний і однорідний шар з лікувальним покриттям ZENFLEX™ Pro DES

- Технологія покриття препарату забезпечує ефективну концентрацію паклітакселу в тканинах протягом 90 днів. Ефективно пригнічуючи рестеноз, він також скорочує непотрібний час впливу паклітакселу. Стент перетворюється на простий стент і з повною доставкою ліків через 180 днів.

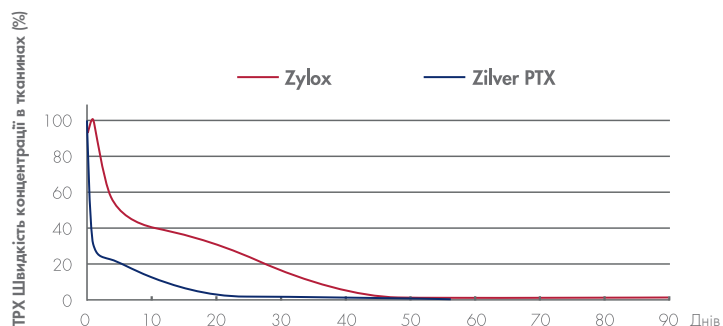

Порівняння розподілу частинок паклітакселу

Технологія покриття ZENFLEX™ Pro контролює розмір частинок нижче за потоком, і мінімізує можливість дистальної емболії.

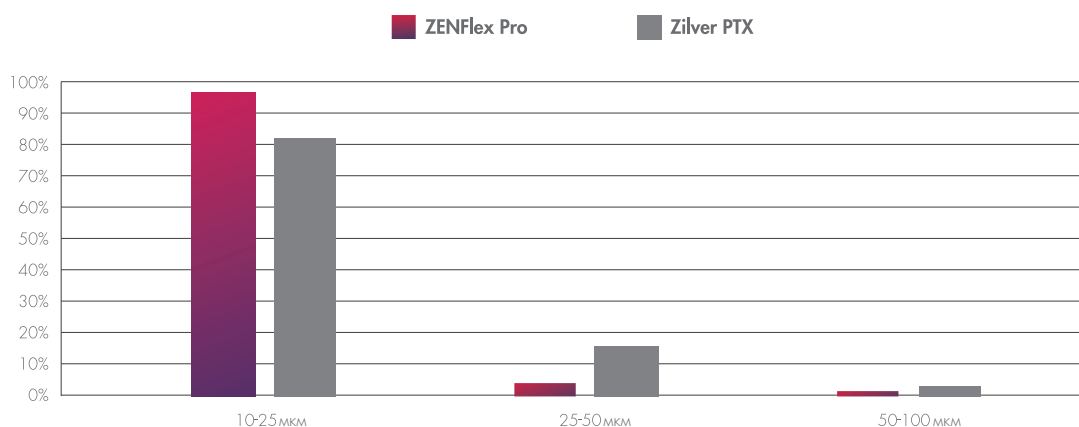

Результати випробувань на тваринах

Технологія покриття ZENFLEX™ Pro контролює розмір частинок нижче за потоком, і мінімізує можливість дистальної емболії.

Звичайний стент



ZENFLEX Pro



7 Днів

28 Днів

90 Днів

Інформація для замовлення

Корисна довжина (80 см)	Корисна довжина (125 см)	Довжина стента (мм)	Діаметр стента (мм)	Оболонка
ZX05020080A	ZX05020125A	20	5	6F
ZX05030080A	ZX05030125A	30		
ZX05040080A	ZX05040125A	40		
ZX05060080A	ZX05060125A	60		
ZX05080080A	ZX05080125A	80		
ZX05100080A	ZX05100125A	100		
ZX05120080A	ZX05120125A	120		
ZX05150080A	ZX05150125A	150		
ZX06020080A	ZX06020125A	20	6	6F
ZX06030080A	ZX06030125A	30		
ZX06040080A	ZX06040125A	40		
ZX06060080A	ZX06060125A	60		
ZX06080080A	ZX06080125A	80		
ZX06100080A	ZX06100125A	100		
ZX06120080A	ZX06120125A	120		
ZX06150080A	ZX06150125A	150		
ZX07020080A	ZX07020125A	20	7	6F
ZX07030080A	ZX07030125A	30		
ZX07040080A	ZX07040125A	40		
ZX07060080A	ZX07060125A	60		
ZX07080080A	ZX07080125A	80		
ZX07100080A	ZX07100125A	100		
ZX07120080A	ZX07120125A	120		
ZX07150080A	ZX07150125A	150		

Система для встановлення периферичного стента з лікувальним покриттям ZENFLEX™ Pro показана для покращення діаметра просвіту при лікуванні первинних рестенотичних симптоматичних уражень, при природніх судинних захворюваннях стегново-підколінних артерій над колінами з діаметром судини від 4,0 мм до 6,5 мм.



Zhejiang Zylox Medical Device Co., Ltd

Адреса: Floor 1&2, Building 1, No. 18 Keji Avenue, Yuhang Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China, 311121
Тел.: (+86) 571 8861 0082 Факс: (+86) 571 8861 0608 info@zyloxmedical.com
www.zyloxtb.com
©2022 Zhejiang Zylox Medical Device Co., Ltd. Усі права захищено.